


## Large Blood Pressure Cuff

For all CVS or Microlife upper arm blood pressure monitors.



Thank you for purchasing a CVS accessory cuff. This cuff is suitable for arm circumferences of 12" to 16". The cuff is easy to adapt to all units.

For automatic monitors simply remove the existing cuff from the monitor and plug the large cuff into the monitor. (Skip to section A)

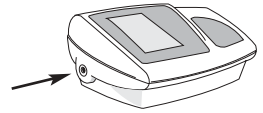





**For semi-automatic (manual inflation) monitors follow these steps:**

1. Remove the T connector from the unit.
2. Detach the hose that leads to the cuff.
3. Remove the connector on the end of the new cuff.
4. Attach replacement cuff's hose to the T connector. Then connect the T connector to the monitor.

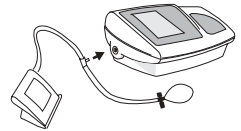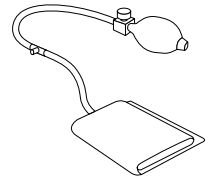

**A - Once the cuff is properly connected to the monitor, prepare the cuff for your measurement.**

1. Thread cuff end through metal loop and slide cuff onto left arm. The cuff is properly placed when the bottom edge is just above the elbow crease, and the "artery mark" is directly over the brachial artery.
2. Fasten the Velcro just tight enough so you can slide two fingers under the cuff.
3. Sit comfortably and rest arm at heart level with palm up.

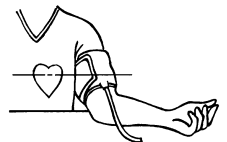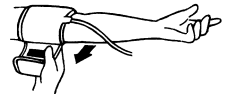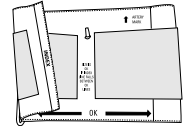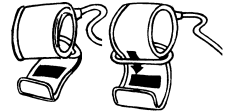

**Be sure to consult the instruction booklet included with your monitor for correct use of your blood pressure monitor.**


**Questions? Call the Customer Help Line Toll Free at 1-866-464-6184.**

## Brazalete de Presión de Tamaño Grande

Para todos los tensiómetros de brazo CVS y Microlife



Gracias por comprar un brazalete de CVS. Este brazalete es para brazo de circunferencia 12" a 16". El brazalete es fácil de adaptar a todas las unidades.

Para los monitores automáticos simplemente remueva el brazalete existente del monitor y conecte el brazalete de tamaño grande en el monitor. (Vaya a la sección A)

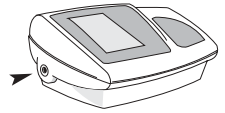





**Para los monitores semi-automático (inflación manual) siga los siguientes pasos:**

1. Remueva el conector T de la unidad.
2. Desconecte la manguera que se dirige al brazalete.
3. Remueva el conector al final del Nuevo brazalete.
4. Conecte la manguera del brazalete de reemplazo a el conector T. Entonces conecte el conector T a el monitor.

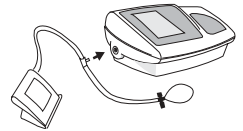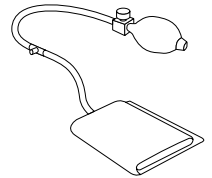

**A - Una vez el brazalete es apropiadamente conectado a el monitor, prepare el brazalete para la medición.**

1. Desenrolle el brazalete y páselo por el anillo de metal. Deslice el brazalete en el brazo izquierdo. El brazalete está propiamente puesto cuando la orilla de abajo está justamente arriba del dobléz del codo, y la marca de la arteria está directamente sobre la arteria.
2. Abroche el Velcro apretado de manera tal que pueda deslizar dos dedos dentro del brazalete.
3. Siéntase cómodamente y descance el brazo al nivel del corazón con la palma hacia arriba.

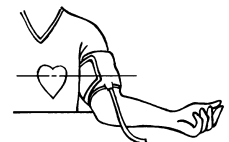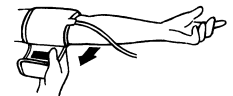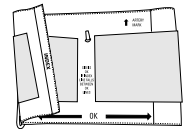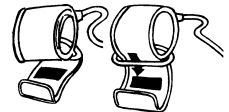

**Este segura de consultar con el manual de instrucciones incluido en su monitor para el uso correcto de su tensiómetro.**

**Preguntas? Llame la Línea Gratuita de Ayuda al Cliente en 1-866-464-6184.**